



PlaniPSY

**NOTICE DE
MISE À JOUR**


4.0

octobre 2022

ATTENTION

Pour installer cette version il est nécessaire d'être en version 3.0 ou supérieure au préalable

Il est également nécessaire d'avoir fait adapter les formules de calcul tel que mentionné dans la [notice de mise à jour de la version 3.0](#)

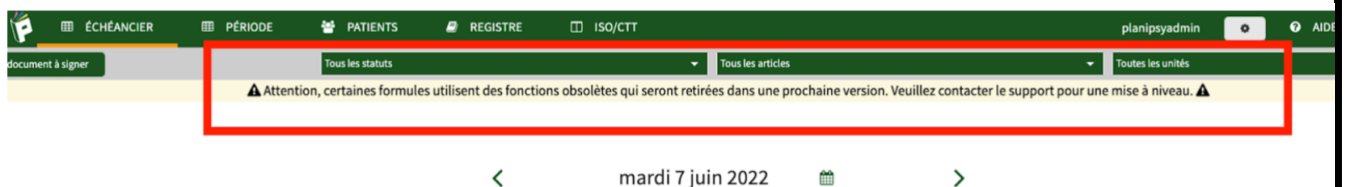

Sommaire

Installation de la mise à jour	4
I. Plateforme basée sur CentOS 7 disponible	5
II. Connecteur pour recevoir les documents depuis le DPI	5
III. Possibilité d'envoyer les documents chargés dans PlaniPSY via le connecteur d'envoi vers le DPI	6
Contacts	6

Installation de la mise à jour

L'installation est possible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle "administrateur" de la plateforme PlaniPSY. Cette installation se fait en deux étapes :

Étape 1: Récupérer le fichier de mise à jour pour le serveur PlaniPSY sur l'espace utilisateur



Accès au fichier de mise à jour

<https://www.pmsipilot.com> > Espace Utilisateur > Mes Logiciels > Mise à jour

Étape 2 : Installer le fichier de mise à jour

- **Se connecter** sur le portail de la plateforme avec vos identifiant et mot de passe ;
- Cliquer sur la roue dentée qui vous permet d'**accéder au Superviseur** ;
- **S'identifier** avec un compte administrateur, sélectionner dans Superviseur le menu "**Mises à jour**", puis "**Import**".

Sur cette page, cliquer sur "**Sélectionner un fichier**" et choisir le fichier de mise à jour que vous avez téléchargé.

puis **Cliquer sur "Importer" pour lancer l'installation.**



Ne JAMAIS relancer la mise à jour si la première tentative a échoué durant le traitement.
Ne JAMAIS redémarrer le serveur au milieu d'une mise à jour.

En cas de souci durant la mise à jour, contacter le support client du Groupe PSIH

support@groupepsih.com - 04 26 10 06 36

I. Plateforme basée sur CentOS 7 disponible

La version 4.0 apporte une évolution majeure d'un point de vue technique.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité dans le temps, nous avons mis à jour plusieurs des briques techniques utilisées (les plus notables étant Java et PostgreSQL).

Nous diffusons maintenant également une Plateforme basée sur le système d'exploitation CentOS 7 au lieu de CentOS 6 qui est obsolète.

Pendant une durée limitée, les évolutions seront livrées à la fois sur la version CentOS 6 qui est actuellement installée chez vous ainsi que sur la version CentOS 7 qui est désormais disponible.

Il y a donc actuellement coexistence des plateformes :

- PlaniPSY 4.0 basée sur CentOS 6 que vous pouvez installer comme les mises à jour habituelles
- PlaniPSY 4.0 basée sur CentOS 7 dont il faut planifier l'installation selon la procédure spécifique

À terme, la plateforme basée sur CentOS 7 sera la seule plateforme qui bénéficiera de mises à jour. La migration vers CentOS 7 doit donc être planifiée dès que possible.


Le passage sur CentOS 7 est une opération particulière, différente des mises à jour habituelles. Une documentation pour vous accompagner est disponible à l'adresse suivante :

<https://aide.groupepsih.com/docs/planipsy/migrer-centos-6-vers-centos-7/>

II. Connecteur pour recevoir les documents depuis le DPI

PlaniPSY peut maintenant recevoir les documents depuis le DPI ou un autre système via un connecteur HL7 MDM.


Les documents reçus automatiquement via ce connecteur depuis le Dossier Patient Informatisé vont apparaître dans la section des documents chargés sur la fiche patient ainsi que dans le registre de la LOI selon votre paramétrage de la catégorie de document.

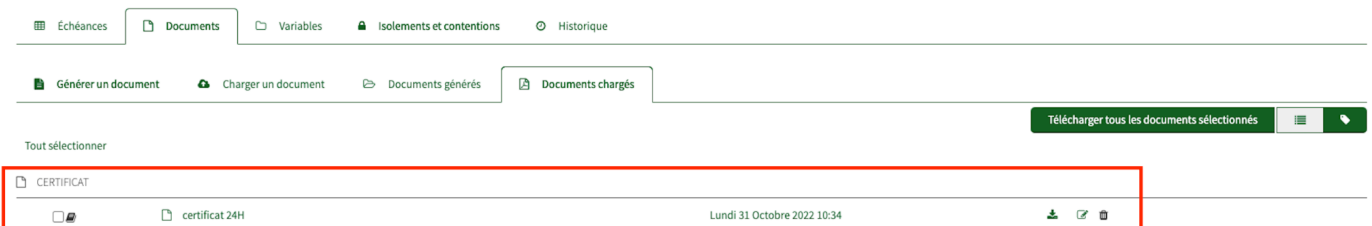

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

III. Possibilité d'envoyer les documents chargés dans PlaniPSY via le connecteur d'envoi vers le DPI

Si le module “envoi de documents vers le DPI” est activé, un nouveau bouton sera affiché dans l’onglet “documents chargés” sur la fiche patient.

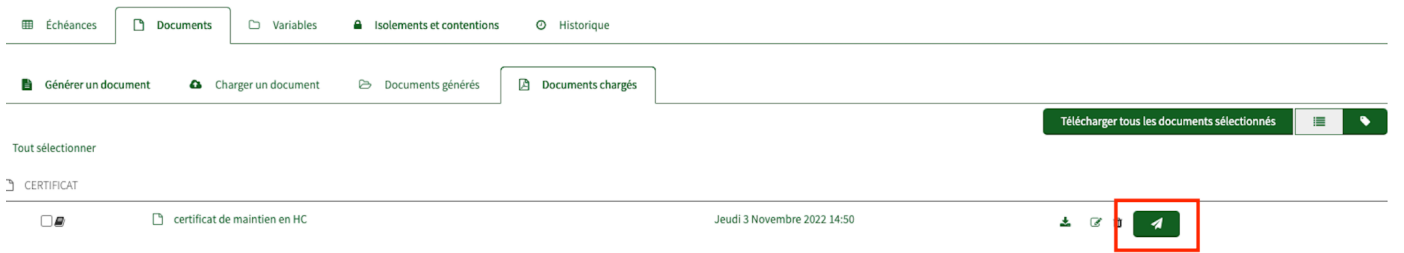

Il vous suffira de cliquer sur ce bouton pour déclencher l’envoi vers le DPI du document chargé dans PlaniPSY.

Un indicateur d’ “envoi en cours” sera alors affiché à droite du bouton.



Une fois l’envoi effectué, l’indicateur affichera une icône d’envoi en succès. Vous pourrez afficher plus de détail en survolant cette icône avec la souris



Envoyé vers le DPI le mercredi 26 octobre 2022 - 15:29:42

Contacts

	Équipe support technique		
		support@groupepsih.com	